


ONNITTELUT UUDEN PRO-SYVÄKUDOSHIERONTALAITTEEN OSTAMISESTA.

Lue kaikki ohjeet ja varoitukset ennen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje, koska se sisältää tärkeää tietoa tulevaa käyttöä varten.


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- a. Syväkudoshierontalaite Pro
- b. Vaihdettavat hierontapäät (x6)
- c. Verkkolaite
- d. Kantokotelo


a.

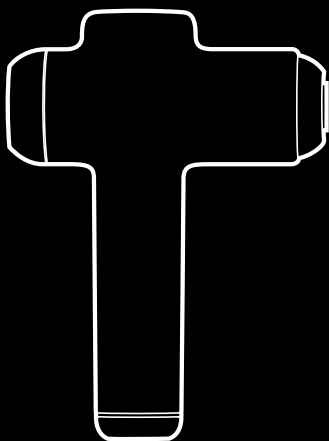

b.

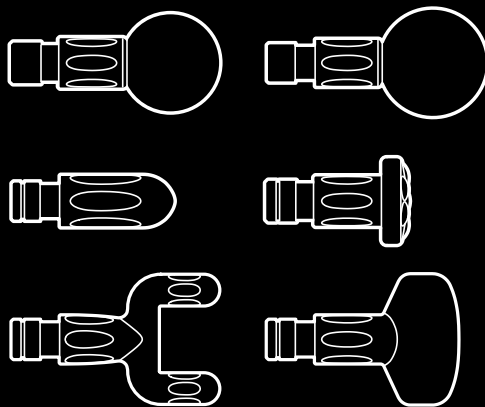

c.

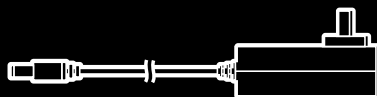

d.



HOITO-OHJEET

- Puhdista vain tahrat. Irrota pistoke ja pyyhi laite kostealla liinalla.
- Kuivaus vain ripustettuna. Rumpukuivaus kielletty.
- Anna kuivua täysin ennen kuin liität pistokkeen.
- Älä upota veteen.
- Älä käytä puhdistusainetta tai saippuaa puhdistamisessa.

TURVALLISUUSVAROITUKSET: LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Ei ole tarkoitettu lapsille. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet raskaana tai sinulla on vamma tai sairaus. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on jokin sairaus, joka estää tuotteen turvallisen käytön.
- Älä käytä mitään muita lisävarusteita kuin mukana tulevia.
- Älä nukahda käytön aikana.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa, jos se on yhdistettynä sähkövirtaan.
- Anna tuotteen aina jäähtyä, jos siitä on tullut liian kuuma.
- Älä koskaan käytä peittojen alla, jolloin ilma-akot voivat peittyä. Ylimääräistä lämpöä voi muodostua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- Älä altista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä etäällä vedestä ja kuumista pinnoista.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Älä kanna tuotetta johdosta.
- Vain sisäkäyttöön.
- Laitteessa on lämpiävä pinta. Lämmölle herkkien henkilöiden täytyy olla varovaisia käyttäessään laitetta.
- Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana tulevalla vaihtovirtaverkkolaitteella (ANTOTEHO DC27V 0.5A).

LADATTAVIA PARISTOJA KOSKEVA VAROITUS

- Tuote sisältää paristoja, joita ei voi ladata.
- Tulipalon tai henkilövahingon vaara, jos paristo puhkaistaan, sitä vahingoitetaan tai väärinkäytetään.
- Älä pura, murskaa, sytytä tuleen tai saata oikosulkuun paristoja.
- Älä koskaan altista paristoja äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Säilytä etäällä syttyvistä materiaaleista ja suorasta auringonvalosta.
- Lataa vain mukana tulleealla laturilla, johdolla ja/tai verkkolaitteilla.
- Vain aikuiset saavat ladata ladattavat paristot.
- Aikuisten tulee valvoa paristojen lataamista.
- Anna paristojen jäähtyä huoneenlämpöön ennen lataamista.
- Lataa syttymättömällä pinnalla ja etäällä syttyvistä tuotteista.
- Lopeta lataaminen, jos paristo kuumenee, turpoaa, savuaa tai siitä tulee voimakasta hajua.
- Tarkista tuotteen kanssa käytettävät laturit säännöllisesti johdon, pistokkeen, kotelon tai muiden osien vaurioiden varalta. Mikäli vaurioita ilmenee, laturia ei saa käyttää ennen kuin vikat on korjattu.
- Kierrätä tai hävitä paristot paikallisten ja kansallisten lakien mukaan.
- Säilytä nämä ohjeet tulevia tarpeita varten.



KIERRÄTYS

Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) valikoivan lajittelun symboli. Se tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta on käsiteltävä paikallisen sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin (WEEE) tai asetuksen mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Elektroniikkatuotteet, jotka eivät sisälly valikoivaan lajitteluprosessiin, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.



Tämä tuote täyttää sovellettavan eurooppalaisen direktiivin ja kansallisen säätelyn vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sovellettavan brittiläisen asetuksen vaatimukset.



Tämä tuote on sovellettavien Australian/Uuden-Seelannin sääntösten mukainen.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

VAROITUS: Muutokset tai mukautukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.



Irrota laite aina pistorasiasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistamista sähköiskujen välttämiseksi.



Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jokaisella kuluttajalla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa kaikki paristot ja akut riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita * vai eivät, paikalliseen keräyspisteeseen tai vähittäismyymälään, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. * Cd = kadmium; Hg = elohopea; Pb = lyijy




Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vain Yhdysvallat: Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja 2020 Merchants, LLC. Irvine, CA, 92618. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sharper Image® -nimi ja logot (mukaan lukien 77-logo ja Tomorrow's Tomorrow) ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Painettu Kiinassa

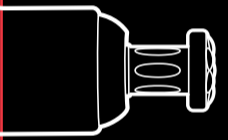


PALAUTUMISEN TULEVAISUUS

01

Lataa liittämällä verkkolaite hierojaan ja sitten seinäpistorasiaan.


LED-merkkivalo on punainen lataamisen aikana ja valkoinen, kun lataus on valmis. Lataa akkua 6 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä käytä hierontalaitetta lataamisen aikana.

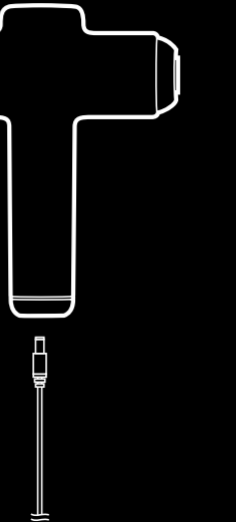

02

Valitse ja kiinnitä haluamasi hierontapää.

Katso vastakkaiselta sivulta vaihdettavien päiden ohje.

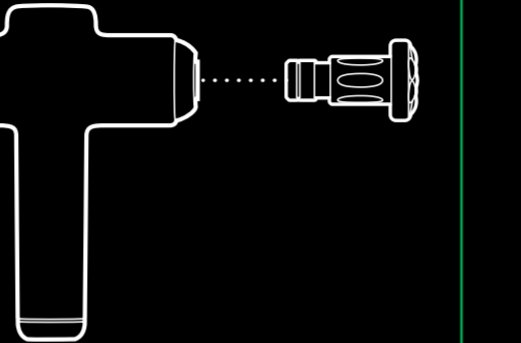

03

Siirrä laitteen pohjassa oleva virtakytkin ON-asentoon. Kytke hierontalaite päälle painamalla virtapainiketta. Voit vaihdella 6 voimakkuustason välillä painamalla toistamiseen.

Voit vaihtaa päitä hieronnan mukauttamiseksi. Vaihda päät vain, kun hierontalaite on pois päältä.

Akun varaustason /
voimakkuuden
merkkivalo

Virta/voimakkuus



04

Käytä 60 sekuntia aluetta kohden. Älä käytä niskaan, päähän tai millekään kovalle tai luiselle kehon alueelle.

Nauti hieronnasta enintään 10 minuuttia kerrallaan.



SHARPER IMAGE®


VAIHDETTAVIEN
PÄIDEN OHJE

PALLO

Tuo yleistä mukavuutta isoille alueille.


TEKEE HYVÄÄ

Pakarialihaksille,
etureislihaksille,
käsivarsille

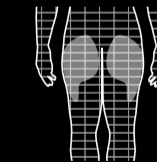

LIHASVAIKUTUS

Alhainen

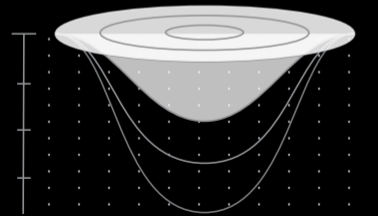


PYÖREÄ

Valmistettu kestävästä vaahdosta,
suunniteltu tarkempaan käsittelyyn.


TEKEE HYVÄÄ

Valmistettu kestävästä
vaahdosta, suunniteltu
tarkempaan käsittelyyn.

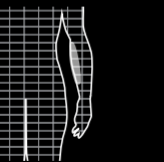

LIHASVAIKUTUS

Alhainen

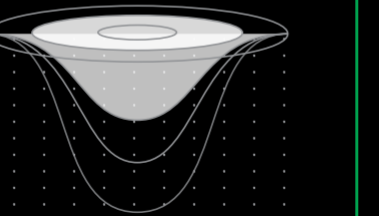


TASAINEN

Vasaramainen isku osuu syvemmillä
lihaksiin.


TEKEE HYVÄÄ

Rintalihaksille,
etureislihaksille,
pakarialihaksille,
pohjelihaksille

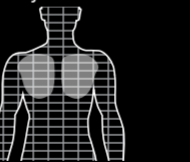

LIHASVAIKUTUS

Keskitaso

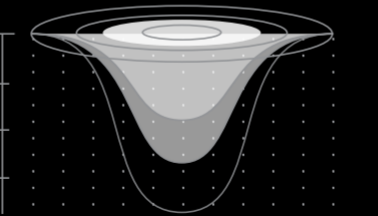


HAARUKKA

Keinuta varovasti puolelta toiselle
kipeiden kohtien käsittelemiseksi.


TEKEE HYVÄÄ

Epäkälle,
etureislihaksille,
pohjelihaksille,
jaloille

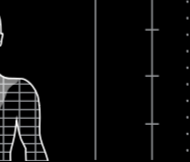

LIHASVAIKUTUS

Korkea

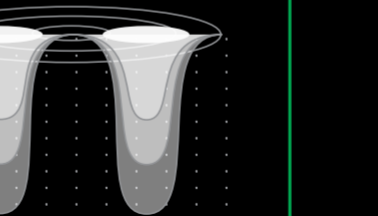


PALKKI

Kaareva reuna tarjoaa miellyttävän
voimakkuuden.


TEKEE HYVÄÄ

IT-jänteelle,
hauislihaksille

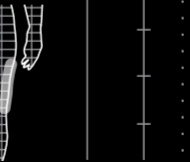

LIHASVAIKUTUS

Korkea

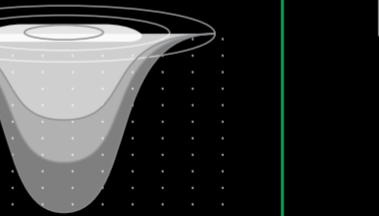

KARTIO

Tämä pistemäinen pää on suunniteltu
erinomaista lihasten käsittelyä varten.


TEKEE HYVÄÄ

Jaloille,
hartioille,
kynärvarsille



LIHASVAIKUTUS

Korkea

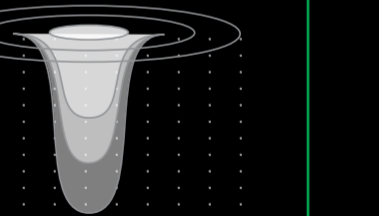

SHARPER IMAGE®

ALOITUSOHJE